


Forenklet brukermanual til system for pasientkamera.

Ved oppstart av **Milestone XProtect Smart Client**, blir alle kamera definert for posten presentert:




Ved å holde musepekeren over ett av kamerabildene vises følgende

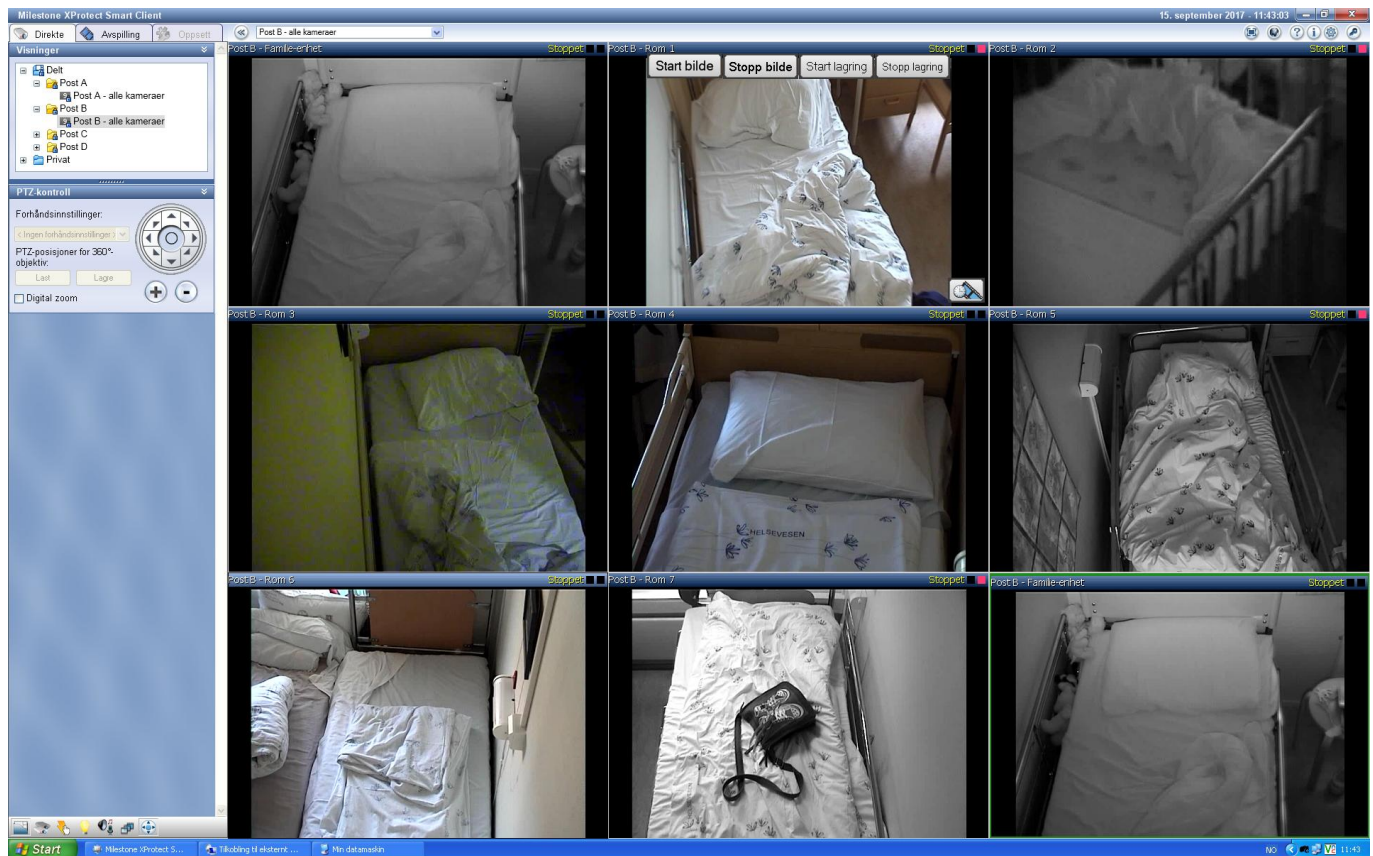

Grønn: Start live bilde
Gul: Stopp live bilde
Orange: Start opptak
Rød: Stopp opptak

For å se eller eksportere opptak, velger man "Avspilling" fanen (gul)

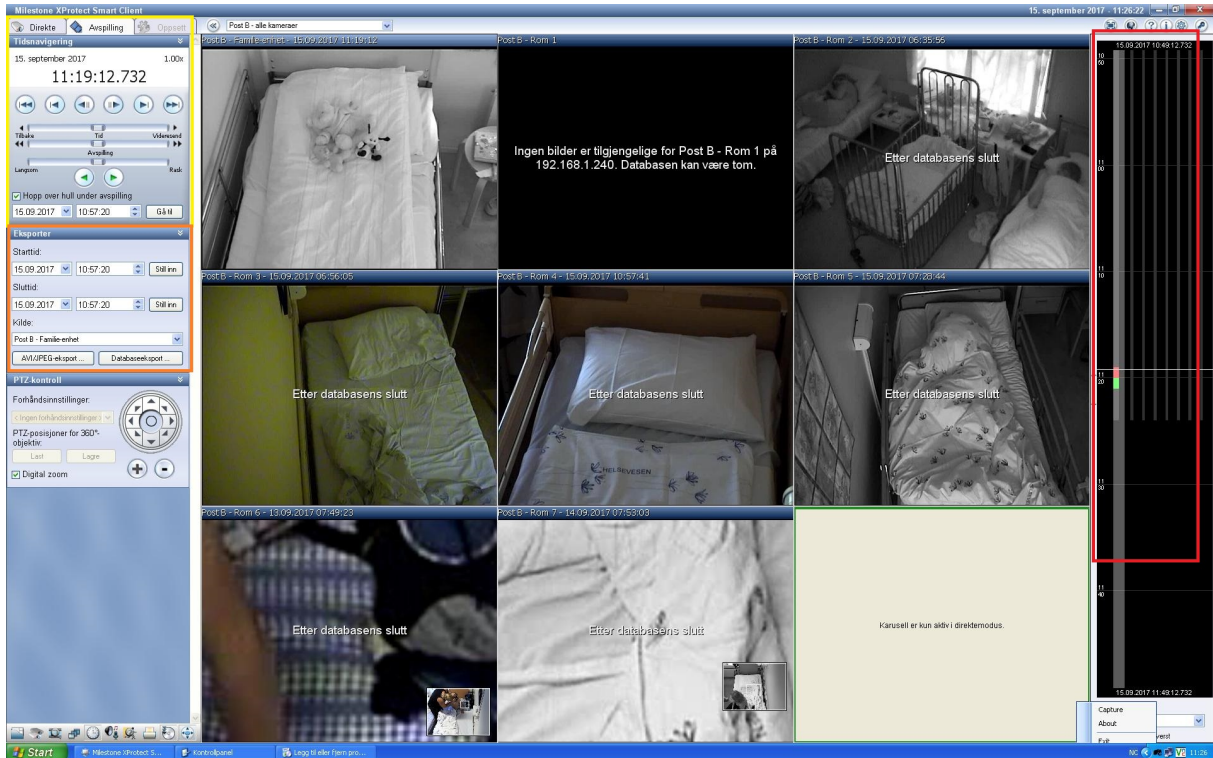

Rød: Her vises hva som er tilgjengelig av opptak på de forskjellige kameraene. Musepekeren kan benyttes til å navigere i tid ved å klikke på det svarte feltet å dra opp eller ned.

Gul: Tidsvelger for opptak. Her settes tidspunkt for å se ønsket hendelse. Spill fremover eller bakover i tid med grønne piler.

Orange: Valg for eksport av video. Velg start og sluttid. Velg deretter **AVI/JPEG-eksport**.

Når eksport er valgt vises følgende bilde:

XProtect Smart Client AVI/JPEG-eksport

Eksportstatus

Klar

Starttid: 15. september 2017 11:19:12

Sluttid: 15. september 2017 11:20:00

Kilde: Post B - Familie-enhet

☒ Inkluder video

☒ Inkluder innkommende lyd

☐ Inkluder utgående lyd

Eksporttype

Eksportformat: ☒ AVI ☐ JPEG

Legg til tidsstempel: ☒ Ja ☐ Nei

Bildehastighet: ☒ Full ☐ Halv

Eksport av digital zoom: ☒ Ja ☐ Nei

AVI-kodek: Cinepak Codec by Radius

Eksportdestinasjon

☒ Skrivebord

☐ Bane C:\Eksport

AVI-filnavn: 15.09.2017 11-19-12.avi

☒ Lukk ved fullføring

Eksporter Avbryt

Gul: Informasjon for opptaket. Kameranavn, tid og lydvalg

Orange: Valg for filtype og videodata som skal eksporteres. Bruk viste innstillinger

Rød: Viser hvor eksportfilen lagres og navn. Velg ett forklarende navn på filen. For eksempel med romnavn og dato og tid